



OXYGEN MASK WITH HIGH HUMIDITY
with Standard 22mm Connector and 7' (2.1 m) Oxygen Tubing

- NL** ZUURSTOFMASKER MET HOGE VOCHTIGHEID
Met standaard 22 mm-aansluiting en 2,1 m zuurstofbuis
- FR** MASQUE À OXYGÈNE AVEC HAUT DEGRÉ D'HUMIDITÉ
Avec raccord 22 mm standard et tube d'oxygène de 2,1 m
- DE** SAUERSTOFFMASKE MIT HOHER FEUCHTIGKEIT
mit 22 mm Standard-Konnektor und 2,1 m lange Sauerstoffleitung
- EL** ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
με τυπικό σύνδεσμο 22 χιλιοστών και σωλήνωση οξυγόνου 2,1 μέτρων (7 ποδών)
- IT** MASCHERA A OSSIGENO CON ALTA UMIDITÀ
con connettore standard da 22 mm e tubo per l'ossigeno da 2,1 m
- PT** MÁSCARA DE OXIGÉNIO COM ALTA UMIDADE
com conector padrão de 22 mm e tubulação de oxigénio 2,1 m
- ES** MASCARILLA DE OXÍGENO CON ALTO GRADO DE HUMEDAD
Con conector estándar de 22 mm y tubo de oxígeno de 2.1 m (7 pies)
- SV** SYRGASMASK MED HÖG FUKTIGHET
med 22 mm standardkoppling och 2,1 m luftslang



OXYGEN MASK WITH HIGH HUMIDITY
with Standard 22mm Connector and 7' (2.1 m) Oxygen Tubing

- NL** ZUURSTOFMASKER MET HOGE VOCHTIGHEID
Met standaard 22 mm-aansluiting en 2,1 m zuurstofbuis
- FR** MASQUE À OXYGÈNE AVEC HAUT DEGRÉ D'HUMIDITÉ
Avec raccord 22 mm standard et tube d'oxygène de 2,1 m
- DE** SAUERSTOFFMASKE MIT HOHER FEUCHTIGKEIT
mit 22 mm Standard-Konnektor und 2,1 m lange Sauerstoffleitung
- EL** ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
με τυπικό σύνδεσμο 22 χιλιοστών και σωλήνωση οξυγόνου 2,1 μέτρων (7 ποδών)
- IT** MASCHERA A OSSIGENO CON ALTA UMIDITÀ
con connettore standard da 22 mm e tubo per l'ossigeno da 2,1 m
- PT** MÁSCARA DE OXIGÉNIO COM ALTA UMIDADE
com conector padrão de 22 mm e tubulação de oxigénio 2,1 m
- ES** MASCARILLA DE OXÍGENO CON ALTO GRADO DE HUMEDAD
Con conector estándar de 22 mm y tubo de oxígeno de 2.1 m (7 pies)
- SV** SYRGASMASK MED HÖG FUKTIGHET
med 22 mm standardkoppling och 2,1 m luftslang

REF OHH-1025-8 - OxyMulti-Mask™ Adult
OPHH-1025-8 - OxyMulti-Mask™ Plus



Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death.
Do not smoke while using this device.
Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

Vorsicht: Sauerstoff in der Gegenwart von Zündstoff und einer Zündquelle kann Feuer mit schweren Personenschäden oder dem Tod als Folge verursachen.
Bitte rauchen Sie nicht während der Benutzung dieses Geräts.
Dieses Einwegprodukt darf wegen Kreuzkontamination und Infektionsrisiko nicht wiederverwendet werden.

Precaución: El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte.
No fume mientras esté usando este dispositivo.
Producto de un solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.

Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles.
Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif.
Produit à usage unique, ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Avvertenza: In presenza di materiale combustibile e infiammabile, l'ossigeno può provocare incendi e causare danni gravi e anche mortali alle persone.
È vietato fumare durante l'uso di questo dispositivo.
Prodotto monouso da non riutilizzare a causa di possibili effetti sulle prestazioni, contaminazione incrociata e rischio d'infezione.

Waarschuwing: Als zuurstof in de buurt is van ontbrandingsmateriaal en een bron van ontbranding, kan dit brand veroorzaken en ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.
Rook niet als u dit apparaat gebruikt.
Product voor enkelvoudig gebruik, niet te herbruiken vanwege het effect op prestaties, kruisbesmetting en het risico op ontsteking.

Cuidado: O oxigénio na presença de um material inflamável e de uma fonte de ignição pode causar um incêndio e deste resultarem lesões pessoais graves ou a morte.
Não fume enquanto estiver usando este aparelho.
Uso único do produto - não deve ser reutilizado devido ao efeito no desempenho, contaminação cruzada e risco de infecção.

Försiktighet! Förekomst av syre i samband med självtändande material och tändningskälla kan orsaka eld och resultera i svåra personskador eller dödsfall.
Rök inte då du använder denna apparat.
Denna produkt är avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas på grund av effekt på prestationsförmåga, kors-kontamination och risk för infektion.

Προσοχή: Το οξυγόνο μπορεί να πάρει φωτιά, αν βρεθεί κοντά σε εύφλεκτες ύλες ή πηγές ανάφλεξης και να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο.
Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα αυτό.
Το προϊόν μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί λόγω της επίδρασης στην απόδοση, την διασταυρούμενη μόλυνση και τον κίνδυνο λοίμωξης.

REF OHH-1025-8 - OxyMulti-Mask™ Adult
OPHH-1025-8 - OxyMulti-Mask™ Plus



Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death.
Do not smoke while using this device.
Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

Vorsicht: Sauerstoff in der Gegenwart von Zündstoff und einer Zündquelle kann Feuer mit schweren Personenschäden oder dem Tod als Folge verursachen.
Bitte rauchen Sie nicht während der Benutzung dieses Geräts.
Dieses Einwegprodukt darf wegen Kreuzkontamination und Infektionsrisiko nicht wiederverwendet werden.

Precaución: El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte.
No fume mientras esté usando este dispositivo.
Producto de un solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.

Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles.
Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif.
Produit à usage unique, ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Avvertenza: In presenza di materiale combustibile e infiammabile, l'ossigeno può provocare incendi e causare danni gravi e anche mortali alle persone.
È vietato fumare durante l'uso di questo dispositivo.
Prodotto monouso da non riutilizzare a causa di possibili effetti sulle prestazioni, contaminazione incrociata e rischio d'infezione.

Waarschuwing: Als zuurstof in de buurt is van ontbrandingsmateriaal en een bron van ontbranding, kan dit brand veroorzaken en ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.
Rook niet als u dit apparaat gebruikt.
Product voor enkelvoudig gebruik, niet te herbruiken vanwege het effect op prestaties, kruisbesmetting en het risico op ontsteking.

Cuidado: O oxigénio na presença de um material inflamável e de uma fonte de ignição pode causar um incêndio e deste resultarem lesões pessoais graves ou a morte.
Não fume enquanto estiver usando este aparelho.
Uso único do produto - não deve ser reutilizado devido ao efeito no desempenho, contaminação cruzada e risco de infecção.

Försiktighet! Förekomst av syre i samband med självtändande material och tändningskälla kan orsaka eld och resultera i svåra personskador eller dödsfall.
Rök inte då du använder denna apparat.
Denna produkt är avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas på grund av effekt på prestationsförmåga, kors-kontamination och risk för infektion.

Προσοχή: Το οξυγόνο μπορεί να πάρει φωτιά, αν βρεθεί κοντά σε εύφλεκτες ύλες ή πηγές ανάφλεξης και να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο.
Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα αυτό.
Το προϊόν μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί λόγω της επίδρασης στην απόδοση, την διασταυρούμενη μόλυνση και τον κίνδυνο λοίμωξης.



Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

IFU0139L



Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

IFU0139L

OxyMask™

O₂/Aerosol
thebetteroxygenmask.com



OHH-1025-8
OPHH-1025-8

*Actual FiO₂ will vary. Breath rate, depth of breathing and distance of the diffuser from the face will affect performance.
**Actual flow rate required should be prescribed in conjunction with pulse oximetry.

Flow Rate (LPM)	FiO ₂
1	23%-26%
2	27%-33%
3	32%-48%
4	45%-57%
6	56%-68%
8	64%-74%
10	70%-77%
12	70%-81%
≥15	72%-83%

* Der tatsächliche FiO₂ variiert. Die Atmungsgeschwindigkeit, Einatmungstiefe und der Abstand des Zerstäubers vom Gesicht beeinflussen die Leistung.
** Der erforderliche eigentliche Durchsatz sollte zusammen mit der Verwendung von Pulsoximetrie vorgeschrieben werden.

* El FiO₂ real variará. El ritmo respiratorio, la profundidad de la respiración y la distancia del difusor desde la cara afectarán el rendimiento.
** La velocidad real de la corriente requerida deberá ser prescrita conjuntamente con el uso de oximetría de pulsos.

* La teneur réelle en FiO₂ variera. Le rythme respiratoire, l'amplitude de la respiration et la distance du diffuseur du visage auront un effet sur le rendement.
** Le débit réel nécessaire devrait être prescrit conjointement avec l'utilisation de l'oxymétrie de pouls.

* Il valore reale FiO₂ varia. Il tasso e la profondità del respiro, come pure la distanza del diffusore dal volto, hanno un effetto sulle prestazioni.
** La portata reale richiesta va prescritta usando l'ossimetria a impulsi.


*De werkelijke FiO₂ varieert. Ademhalingsnelheid en de afstand van het gezicht van de verspreider beïnvloedt de prestatie.
** De werkelijke, verplichte stroom moet voorgeschreven worden in samenwerking met het gebruik van puls oximetrie.

*FiO₂ real varia. O índice da respiração, profundidade de respiração e distância do difusor do rosto afeta o desempenho.
** O índice do fluxo real exigido deve ser prescrito em conjunção com o uso de oximetria de pulsação.

*Den aktuella FiO₂ kommer att variera. Andningshastighet, andningsdjuphet och distansen av diffundering från ansiktet kommer att påverka utförandet.
** Den aktuella flytningshastigheten som behövs borde vara ordinerad i kombination med användning av puls-oximetern.

* Το πραγματικό FiO₂ θα ποικίλλει. Ο ρυθμός της αναπνοής, το βάθος της αναπνοής και η απόσταση του διαχυτή από το πρόσωπο θα επηρεάσουν την απόδοση.
** Η απαιτούμενη πραγματική ταχύτητα ροής θα πρέπει να προδιαγράφεται σε συνδυασμό με τη χρήση οξυμέτρου παλμού.

- **Remove and discard the mask packaging insert (1).
- **Den Verpackungseinsatz der Maske (1) entfernen und entsorgen.
- **Retirer et jeter la garniture d'emballage du masque (1).
- **Retire y deseché el material de embalaje de la mascarilla (1).
- **Rimuovere l'inserto di imballaggio della maschera (1) e provvedere al suo smaltimento.
- **Retire e elimine o suporte de protecção da máscara (1).
- **Avlägsna och kasseri maskens transportskydd (1).
- **Verwijder het verpakkingsinzetstuk (1) uit het masker en voer het af.
- ** Αφαιρέστε και απορριψίτε το ένθετο συσκευασίας μάσκα (1).

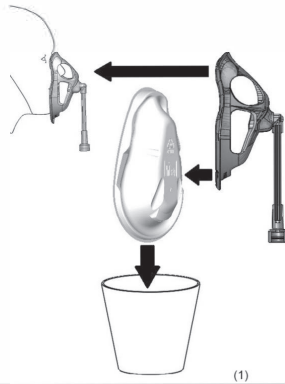

IFU0139L

OxyMask™

O₂/Aerosol
thebetteroxygenmask.com



OHH-1025-8
OPHH-1025-8

*Actual FiO₂ will vary. Breath rate, depth of breathing and distance of the diffuser from the face will affect performance.
** Actual flow rate required should be prescribed in conjunction with pulse oximetry.

Flow Rate (LPM)	FiO ₂
1	23%-26%
2	27%-33%
3	32%-48%
4	45%-57%
6	56%-68%
8	64%-74%
10	70%-77%
12	70%-81%
≥15	72%-83%

* Der tatsächliche FiO₂ variiert. Die Atmungsgeschwindigkeit, Einatmungstiefe und der Abstand des Zerstäubers vom Gesicht beeinflussen die Leistung.
** Der erforderliche eigentliche Durchsatz sollte zusammen mit der Verwendung von Pulsoximetrie vorgeschrieben werden.

* El FiO₂ real variará. El ritmo respiratorio, la profundidad de la respiración y la distancia del difusor desde la cara afectarán el rendimiento.
** La velocidad real de la corriente requerida deberá ser prescrita conjuntamente con el uso de oximetría de pulsos.

*La teneur réelle en FiO₂ variera. Le rythme respiratoire, l'amplitude de la respiration et la distance du diffuseur du visage auront un effet sur le rendement.
** Le débit réel nécessaire devrait être prescrit conjointement avec l'utilisation de l'oxymétrie de pouls.

* Il valore reale FiO₂ varia. Il tasso e la profondità del respiro, come pure la distanza del diffusore dal volto, hanno un effetto sulle prestazioni.
** La portata reale richiesta va prescritta usando l'ossimetria a impulsi.


*De werkelijke FiO₂ varieert. Ademhalingsnelheid en de afstand van het gezicht van de verspreider beïnvloedt de prestatie.
** De werkelijke, verplichte stroom moet voorgeschreven worden in samenwerking met het gebruik van puls oximetrie.

*FiO₂ real varia. O índice da respiração, profundidade de respiração e distância do difusor do rosto afeta o desempenho.
** O índice do fluxo real exigido deve ser prescrito em conjunção com o uso de oximetria de pulsação.

*Den aktuella FiO₂ kommer att variera. Andningshastighet, andningsdjuphet och distansen av diffundering från ansiktet kommer att påverka utförandet.
** Den aktuella flytningshastigheten som behövs borde vara ordinerad i kombination med användning av puls-oximetern.

* Το πραγματικό FiO₂ θα ποικίλλει. Ο ρυθμός της αναπνοής, το βάθος της αναπνοής και η απόσταση του διαχυτή από το πρόσωπο θα επηρεάσουν την απόδοση.
** Η απαιτούμενη πραγματική ταχύτητα ροής θα πρέπει να προδιαγράφεται σε συνδυασμό με τη χρήση οξυμέτρου παλμού.

- **Remove and discard the mask packaging insert (1).
- **Den Verpackungseinsatz der Maske (1) entfernen und entsorgen.
- **Retirer et jeter la garniture d'emballage du masque (1).
- **Retire y deseché el material de embalaje de la mascarilla (1).
- **Rimuovere l'inserto di imballaggio della maschera (1) e provvedere al suo smaltimento.
- **Retire e elimine o suporte de protecção da máscara (1).
- **Avlägsna och kasseri maskens transportskydd (1).
- **Verwijder het verpakkingsinzetstuk (1) uit het masker en voer het af.
- ** Αφαιρέστε και απορριψίτε το ένθετο συσκευασίας μάσκα (1).

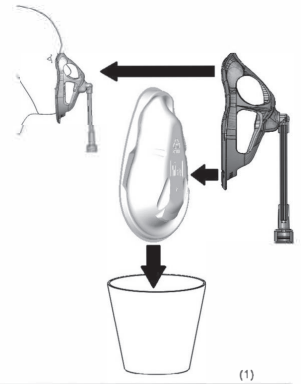

IFU0139L